Vicepresidencia de Telecomunicaciones y Tecnología Académica
Oficina Central de Informática y Telecomunicaciones (OCIT)



Pruebas diagnósticas desde EzyVet a VetLab Station (IDEXX)

Escuela de Medicina Veterinaria
UAGM – Recinto de Gurabo

Preparado por: Israel Ortiz Olmo III

Administrador de OnBase / EzyVet

©2026

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido ii
Revisión del documento 3
Introducción 3
Solicitud de una prueba diagnóstica 4
Solicitud desde la plataforma EzyVet 4
Realización de la prueba en la estación de VetLab 7
Verificación de los resultados de las pruebas diagnósticas en la plataforma EzyVet 10
Opciones adicionales para ver los resultados de las pruebas diagnósticas 11

Revisión del documento

Personal a cargo	Fecha	Estatus del documento
Israel Ortíz Olmo III *Administrador EzyVet/OnBase*	Abril 2026	Creación del documento
		Últimas correcciones
		Traducción al inglés
Ivelisse N. García Rodríguez *Tecnóloga Veterinaria*		Capturas de pantallas en IDEXX
		Revisión
Dr. Fred V. Soltero *Director Veterinary Teaching Hospital (VTH)*		Revisión

Introducción

La plataforma de ***EzyVet*** es la aplicación oficial utilizada por la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) con el fin de registrar las actividades veterinarias, como parte de sus requerimientos de práctica. Ésta opera completamente en la nube y es compatible con cualquier navegador Web.


Nuestra plataforma de ***EzyVet*** integra con diferentes equipos para pruebas diagnósticas y citológicas de ***IDEXX***. En esta guía se explica el proceso para realizar las pruebas diagnósticas desde la plataforma ***EzyVet*** hacia las estaciones de análisis, ***VetLab Stations***, que se encuentran instaladas en el recinto de Gurabo.

Solicitud de una prueba diagnóstica

Toda petición de solicitud para prueba diagnóstica comienza desde la plataforma de EzyVet. A través de las APIs de integración --- aplicaciones para apoyar la integración entre sistemas --- es posible la comunicación de datos entre ***EzyVet*** y el equipo de IDEXX, la estación de ***VetLab***. A continuación, se explica el proceso para solicitar una prueba diagnóstica en ***EzyVet***, procesarla en la estación de ***VetLab*** y recopilar los resultados en ***EzyVet***.


Solicitud desde la plataforma EzyVet

1. Acceder a la plataforma de ***ezyVet***.
2. Asegurarse de que el paciente tenga récord clínico. En caso de no tenerlo, debe crearlo accediendo a la pestaña de ***Clinical***.

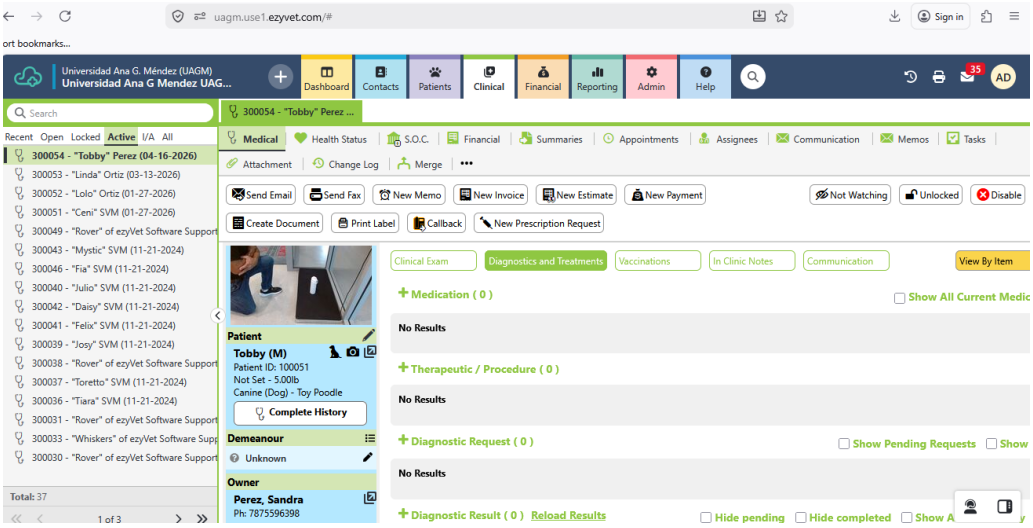


3. Una vez creado el récord del paciente, debe seleccionarlo para buscar su información.


4. Seleccionar la opción ***Diagnostics and Treatments***; luego seleccione el signo **+** bajo ***Diagnostic Request***.

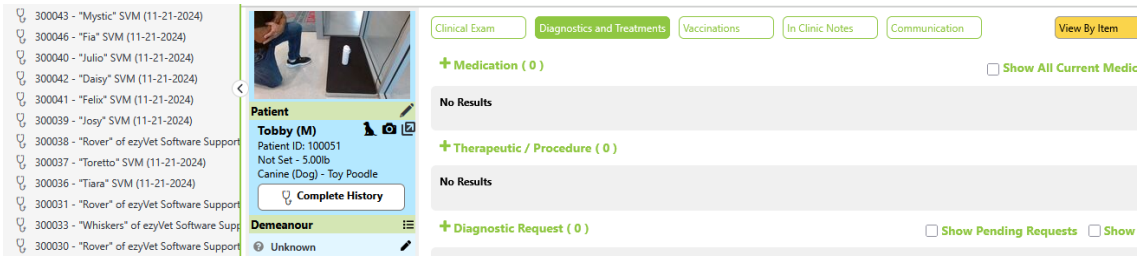


5. Se abre la ventana de diálogo de ***New Diagnostic Request***. Dentro de esta ventana, complete los siguientes datos:

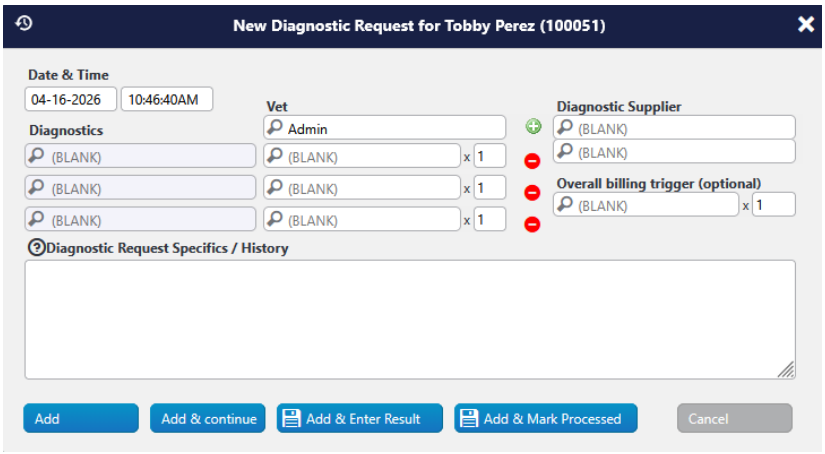

- Seleccionar el doctor en la sección ***Vet*** --- <u>debe indicar en paréntesis *Animal House*</u>.
- Seleccionar en la sección ***Diagnostic Supplier*** la que dice *DX-IVLS – IDEXX IVLS*.
- Bajo la sección de ***Diagnostics***, se deben seleccionar las pruebas a realizar al paciente. En este ejemplo, se seleccionó una prueba de CBC (*IVLS-CBC – IDEXX VetLab CBC*). El campo de la derecha se va a poblar automáticamente con el tipo de prueba. Puede añadir hasta 3 pruebas diagnósticas.
- Seleccione la estación de ***VetLab*** de IDEXX donde realizará la prueba diagnóstica.
- Antes de someter la prueba, verifique que tenga toda su información completada (vea siguiente ilustración). Una vez completado este paso, darle al botón ***Add***.

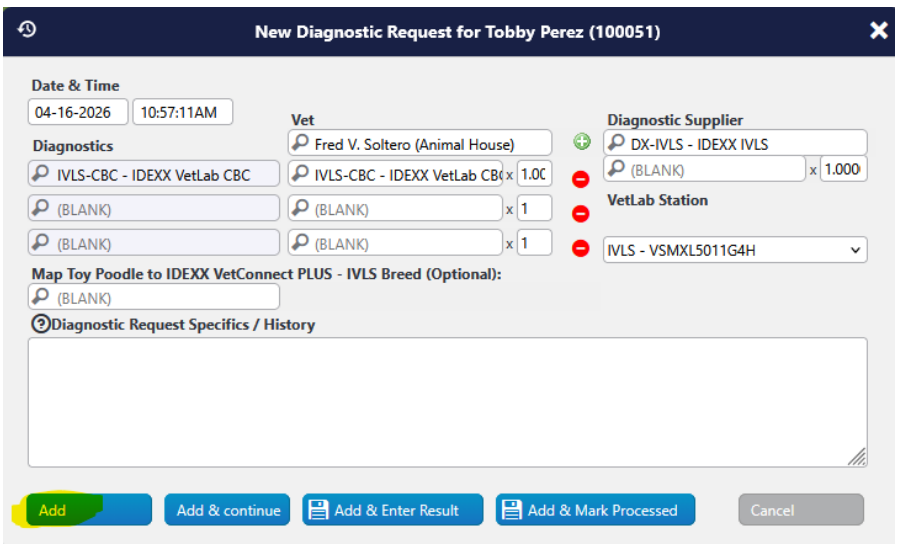


El sistema le confirmará sobre la solicitud de diagnóstico. Podrá revisar en la sección ***Diagnostic Request***, donde verá su solicitud.

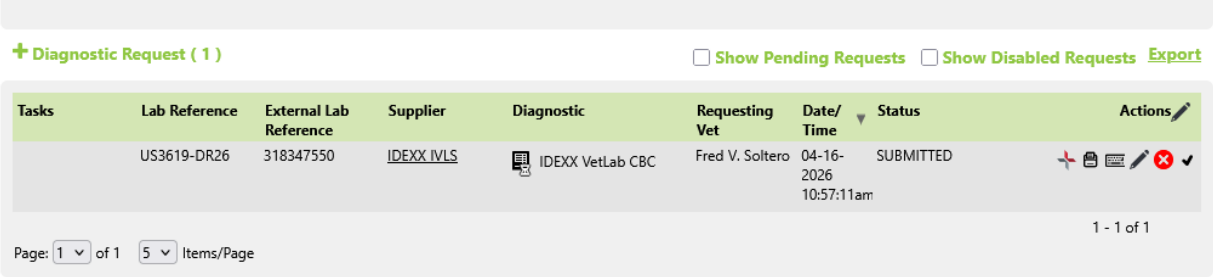

En la siguiente sección, se continuará con el proceso de la prueba diagnóstica desde la estación de ***VetLab***.

Realización de la prueba en la estación de VetLab


Una vez completada la solicitud de la prueba diagnóstica en ***EzyVet***, ésta llegará a la estación de ***VetLab*** seleccionada. Aquí podrá ver las pruebas solicitadas que están pendientes por realizar bajo la columna izquierda (*Pending*) en la pantalla de la estación.

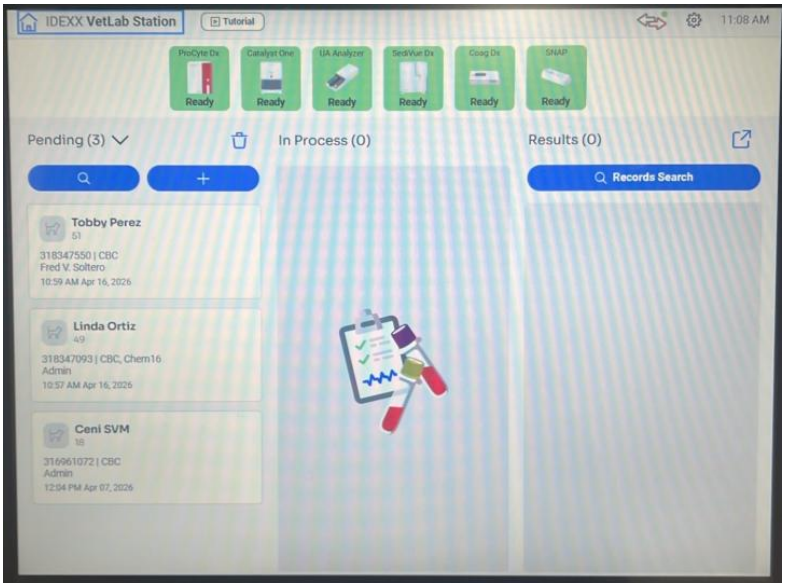


A continuación, los pasos para comenzar la prueba diagnóstica en la estación de ***VetLab***.

1. Seleccione el paciente en la estación de trabajo, bajo la columna de ***Pending***.

2. En la siguiente pantalla, verifique el tipo de prueba que están solicitando. Una vez la verifica, seccione el tipo de máquina a realizar la prueba. En nuestro ejemplo, seleccione ***ProCyte Dx*** en las opciones de la derecha (vea siguiente ilustración).

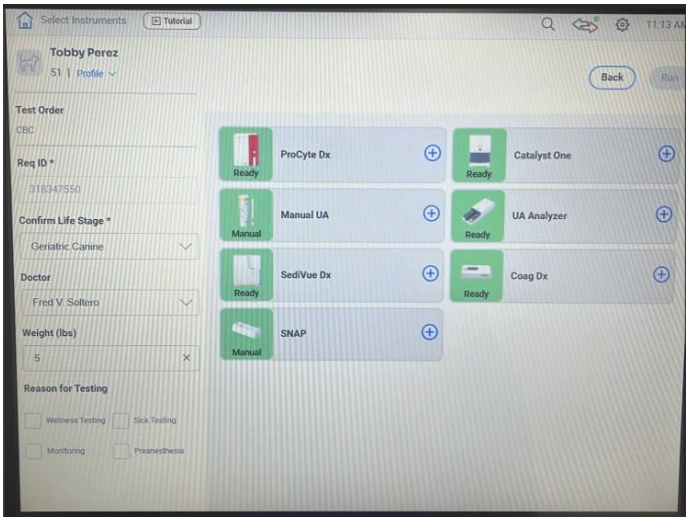


3. Bajo ***ProCyte Dx***, seleccione el tipo de prueba (*Whole Blood*). Luego darle al botón ***Run*** que aparece en el lado superior derecho de la pantalla de la estación.

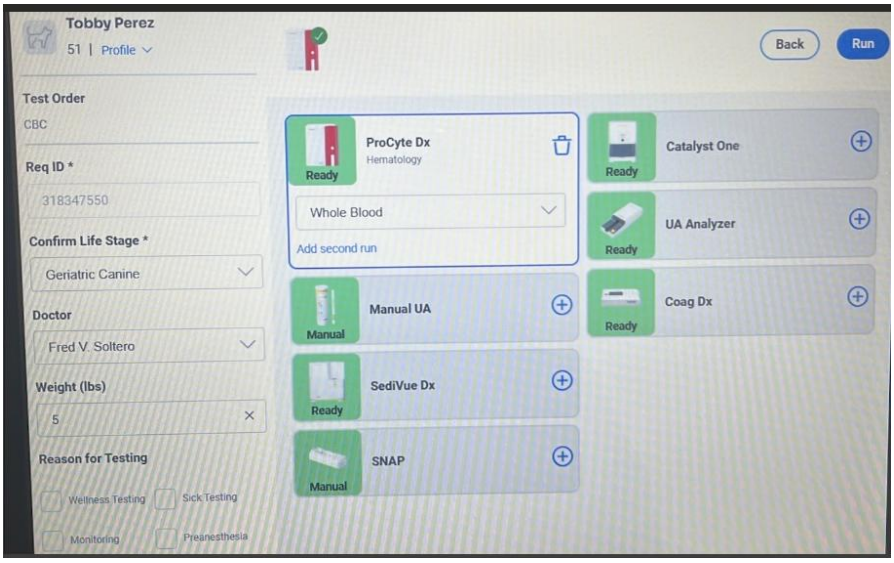


4. Espere a que la máquina de diagnóstico complete la corrida de la prueba; ésta pudiera demorar algunos minutos.

5. Una vez completada la prueba por la máquina seleccionada, la estación de ***VetLab*** recibirá los resultados. Puede verificarlo en la columna de ***Results*** en el lado derecho de la pantalla de la estación.

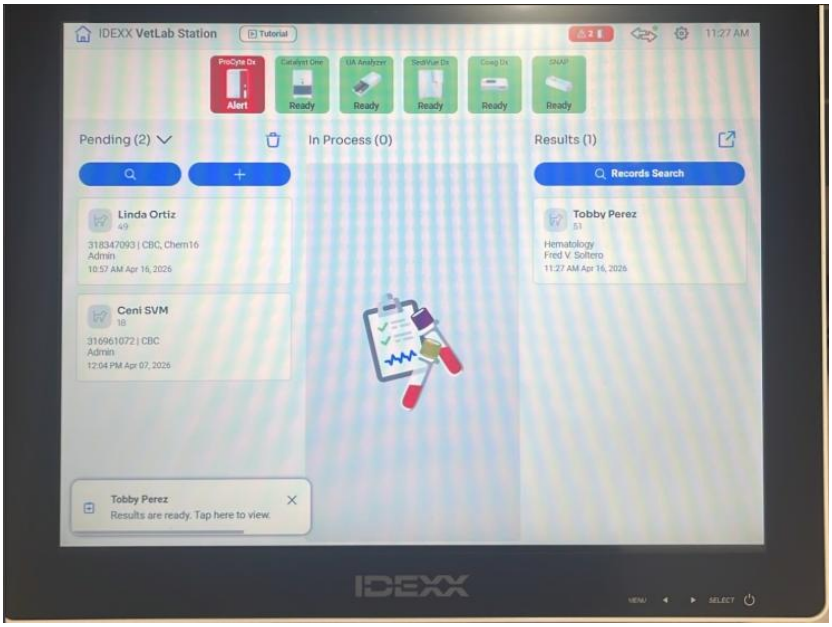

Al seleccionar el récord del paciente bajo la columna de ***Results*** en pantalla de la estación, podrá ver sus resultados. También, el sistema los imprimirá automáticamente y enviará los resultados a la plataforma de ***ezyVet***.

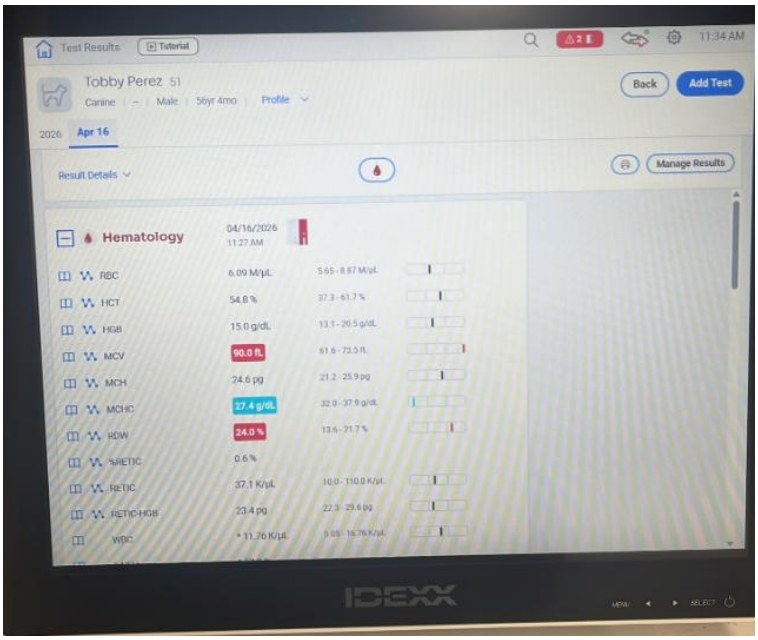


En caso de necesitar copias adicionales de los resultados, puede seleccionar el icono de la impresora que se ubica sobre la página de éstos.


Esto concluye la prueba diagnóstica en la estación de ***VetLab***. En la próxima sección, se describen los pasos para verificar los resultados desde la plataforma de ***ezyVet***.

Verificación de los resultados de las pruebas diagnósticas en la plataforma EzyVet

De la estación de ***VetLab*** regresamos a la plataforma de ***EzyVet***, donde aparece el récord del paciente. Si el récord se encuentra abierto, dele un "refresh" a la página para que el sistema le muestre los resultados de las pruebas diagnósticas. Podrá ver los resultados en la sección ***Diagnostic Result***; seleccione la flecha al final de la línea del récord para expandir los resultados.

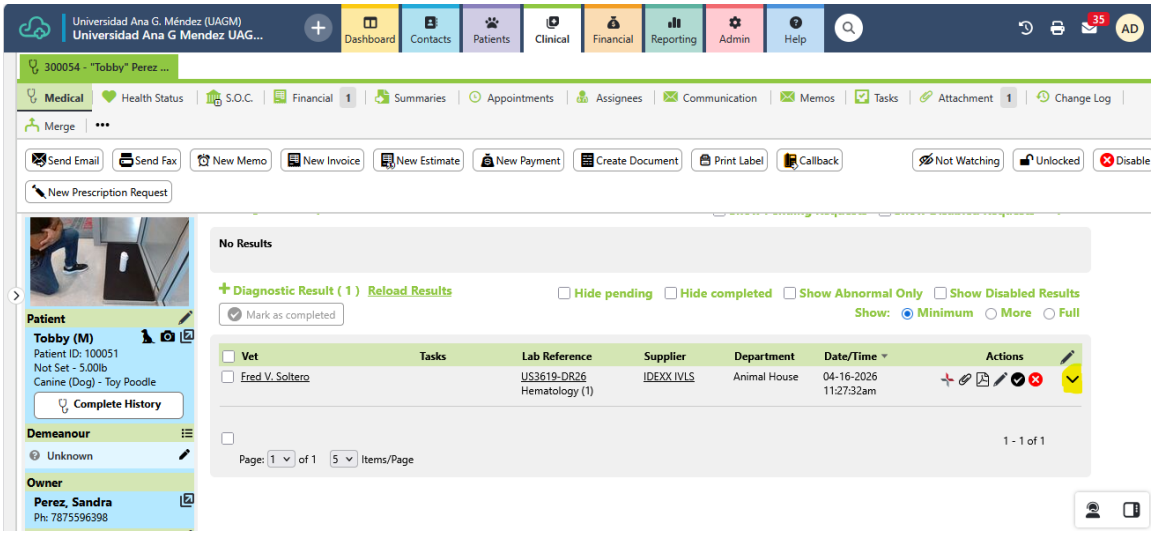


Asegúrese de que no tenga activado algún filtro u opciones para que pueda ver todos los resultados obtenidos.

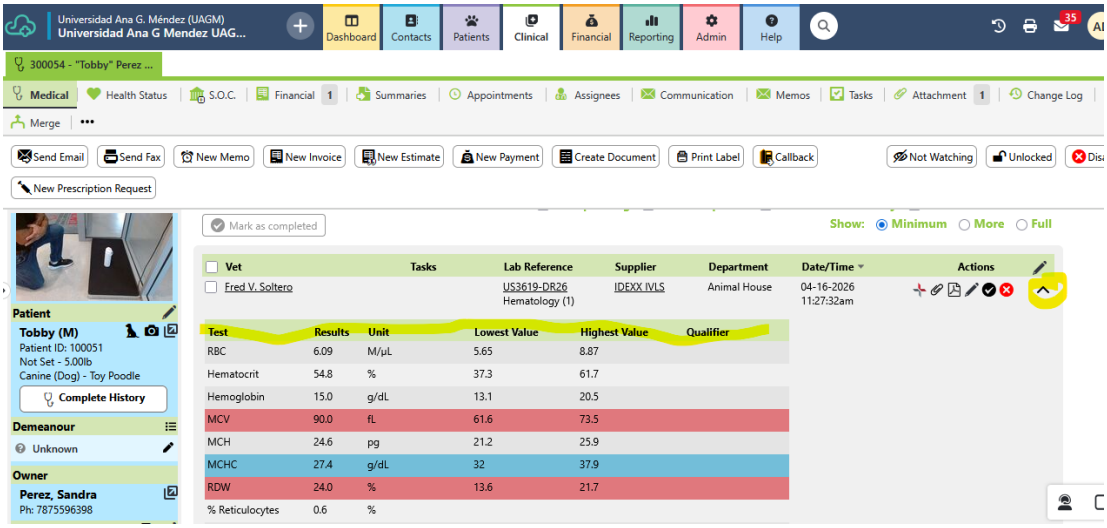


Opciones adicionales para ver los resultados de las pruebas diagnósticas

La plataforma de EzyVet provee diferentes alternativas para ver los resultados diagnósticos y compartirlos a través de correo electrónico. Las alternativas son las siguientes:


Opción #1 >> Puede verificar la copia de los resultados de las pruebas diagnósticas en formato PDF dando un “click” sobre el icono de Adobe.

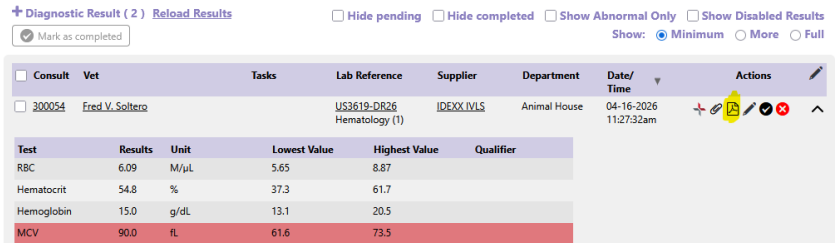


El archivo abrirá y se descargará automáticamente en su computadora.

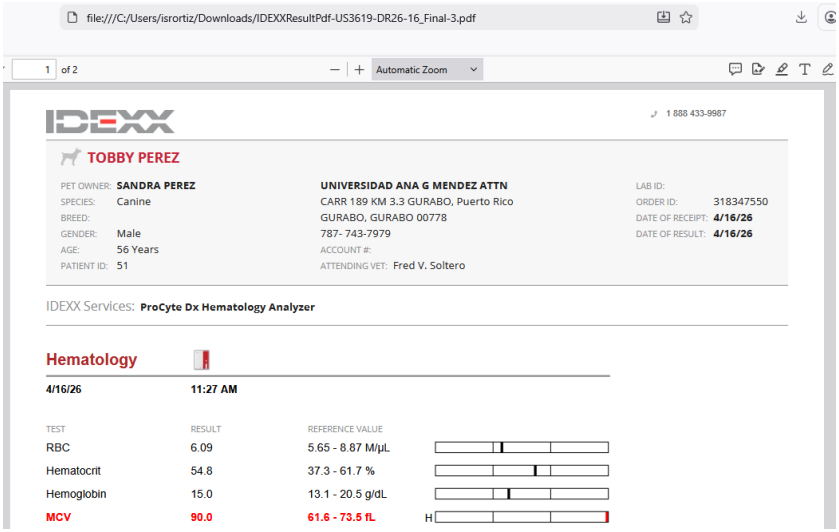


Opción #2 >> Puede dar un “click” sobre la presilla para descargar el archivo.

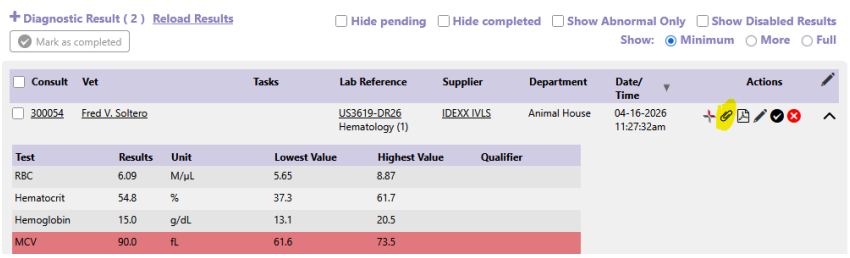


En este caso, el archivo no se descargará automáticamente, sino que abrirá una ventana de diálogo donde le mostrará los archivos adjuntos del paciente. Al dar un “click” sobre el archivo, éste abrirá y descargará automáticamente en su computadora.

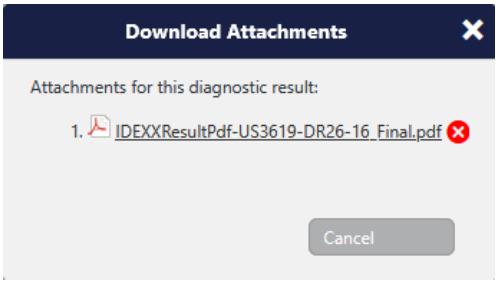


Opción #3 >> Puede visualizar los resultados al dar un “click” sobre el icono de ***VetConnect Plus*** (el signo **+** en colores).

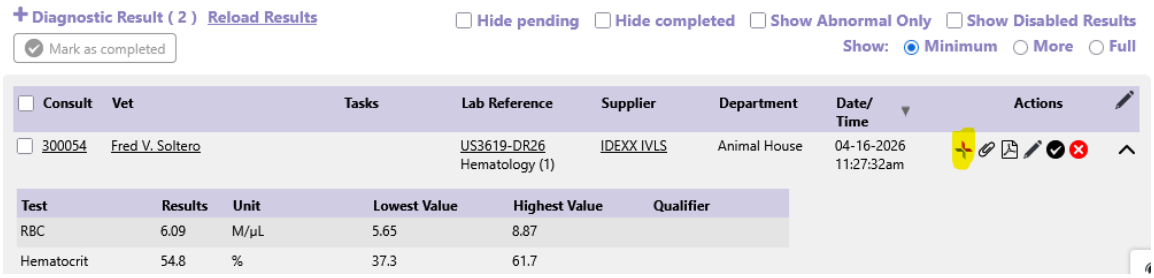


Podrá observar que el formato de lectura de los resultados es similar a como si lo visualizara desde la estación de ***VetLab***. También puede acceder a diferentes opciones para imprimir, compartir o realizar consultas de los resultados a través de los iconos.

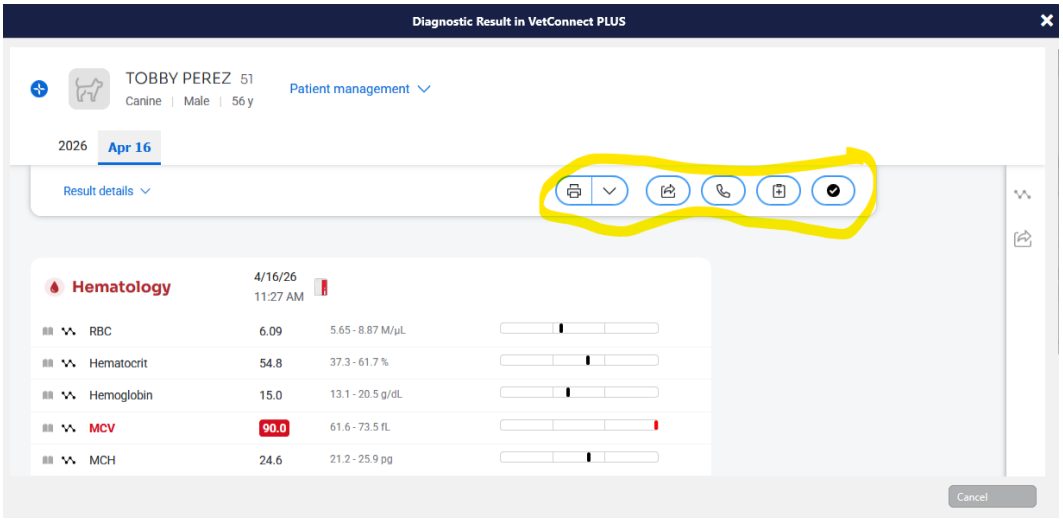


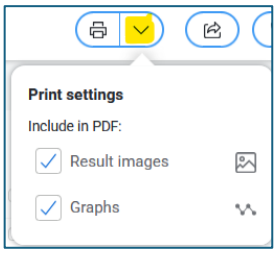

En este botón, podrá seleccionar las opciones de datos para incluir en su archivo PDF. Luego, podrá darle al botón de la impresora para descargar el archivo en su computadora.

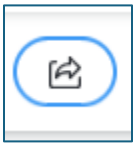

En este botón, podrá compartir los resultados por correo electrónico, a una red de servicio exclusiva de IDEXX, o a otro colega.

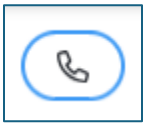

A través de este botón, puede consultar un servicio médico especializado de IDEXX. Le brinda información sobre el número de contacto para hacer las consultas.

